

Distribuição

O modo de distribuição apenas estará disponível se o local estiver configurado corretamente no servidor. Veja como configurar [aqui](#)

Pacientes

Ao clicar no botão de **Distribuição** (*Dispensary*) você será apresentado a lista de pacientes (*patients*). Ali você pode pesquisar por um paciente usando o campo de texto e digitar a busca.

Dica: Você pode pesquisar pelo primeiro nome e sobrenome usando uma vírgula entre eles. Por exemplo: g, j irá pesquisar por todos os pacientes cujos sobrenomes começam com G e os primeiros nomes começam com J.

Adicionando um novo Paciente

- Para criar um novo paciente, clique no botão **Novo Paciente**

Patient Details

First name
is required

Last name
is required

Date of birth
is required

01/02/2020 CALENDAR

Email

Phone

Address 1

Address 2

Cancel Save

- A tela para criar paciente será aberta
- Os campos marcados como CAMPO OBRIGATÓRIO deverão ser preenchidos. Os demais campos são opcionais.
- O botão para salvar somente estará habilitado quando todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos.
- Assim que todos os detalhes do paciente forem preenchidos, clique no botão **Salvar (Save)**

The screenshot shows a mobile application interface for editing patient details. At the top, it says "Patient Details". Below that, there are four required fields with error messages: "First name is required" (with "Joshua" entered), "Last name is required" (with "Griffin" entered), "Date of birth is required" (with "25/06/1989" entered and a calendar icon), and "Email" (with an empty field). There are also fields for "Phone" and "Address 1" (both empty) and "Address 2" (empty). At the bottom right are two buttons: "Cancel" (orange border) and "Save" (orange background).

Editando os detalhes do Paciente

Para editar os detalhes do Paciente, clique no ícone da linha deste paciente na coluna **Editar (Edit)**.

The screenshot shows the mSupply mobile application interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text "Dispensary", the mSupply logo, and connectivity status indicators (SYNC ENABLED, cloud, signal, battery). Below the navigation bar is a search bar with a magnifying glass icon and the text "j.g". To the right of the search bar are buttons for "New Patient" (with a red X), "Edit" (pencil icon), and "Dispense" (arrow icon).

The main area is a table with the following columns: CODE, FIRST NAME, LAST NAME, D.O.B., HISTORY, EDIT, and DISPENSE. A header row contains the column names with sorting arrows. A single patient record is listed:

CODE	FIRST NAME	LAST NAME	D.O.B.	HISTORY	EDIT	DISPENSE
zamh4	Joshua	Griffis	Jun 25, 1989			

Visualizando o histórico do Paciente

Você também pode visualizar o histórico de prescrições do paciente ao clicar no ícone da linha deste paciente na coluna **Histórico** (*History*).

Patient History - Joshua Griffin				X
ITEM CODE	ITEM NAME	QUANTITY	PREScriBER	
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	1	James Smith	

Prescritores

Você poderá visualizar, editar e adicionar novos Prescritores da mesma forma que mostramos para os Pacientes.

Para visualiza-los clique na aba **Prescritores** (*Prescribers*) na area superior esquerda do ecrã:

Para editar um Prescritor, clique no ícone da linha deste prescritor na coluna **Editar** (*Edit*). Ao clicar você será apresentado a uma tela com os detalhes do Prescritor:

Prescriber Details

First name
is required

Last name
is required

Registration code
is required

Email

Phone

Address 1

Address 2

Cancel Save

Assim como na tela de pacientes, quando você inserir todos os campos necessários você poderá salvar o registro.

The screenshot shows the mSupply Dispensary application interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text "Dispensary", the mSupply logo, a "SYNC ENABLED" status indicator, and a cloud connectivity icon. Below the navigation is a search bar with tabs for "Patients" (selected) and "Prescribers". A magnifying glass icon is part of the search bar. To the right of the search bar is a button labeled "New Prescriber". The main area is a table listing prescribers. The columns are "CODE", "FIRST NAME", "LAST NAME", and "EDIT". There are two rows of data:

CODE	FIRST NAME	LAST NAME	EDIT
J-1234	Jasmine	McKewen	
JS-987	James	Smith	

Distribuição para pacientes

- Primeiramente, encontre o paciente para quem serão distribuídos os medicamentos (usando o campo de pesquisa ou arrastando o dedo na tela de baixo para cima até encontrar o nome procurado na lista).
- Clique no ícone da linha deste paciente na coluna **Distribuir (Dispense)**.

CODE	FIRST NAME	LAST NAME	D.O.B.	HISTORY	EDIT	DISPENSE
zara4	Joshua	Giffin	Jun 25, 1993			

A distribuição é feita em 3 etapas. Cada passo deve ser completado antes de seguir para o próximo passo.

Passo 1

Selecione um Prescritor clicando no ícone de SELEÇÃO

- Note: Você pode clicar sobre os ícones HISTÓRICO e EDITAR ao lado do nome do paciente para editar os detalhes deste paciente ou para ver o histórico de prescrições
- Você pode pesquisar por Presritores usando o campo de busca
- Ao selecionar um Prescritor, você também poderá editar este prescritor a qualquer momento clicando sobre o ícone de EDITAR ao lado do nome do Prescritor.

Passo 2

Selecione itens para distribuição clicando sobre os itens na lista da area esquerda do ecrã. Você também poderá pesquisar por itens usando o campo de busca

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for prescription creation. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text "Prescription 922", the mSupply logo, a "SYNC ENABLED" status indicator, and a cloud connectivity icon. Below the navigation bar, the screen is divided into three main sections: "1 Select the prescriber" (highlighted in red), "2 Select items" (highlighted in red), and "3 Finalise". The "Patient" section shows "Joshua Griffin" and a search icon. The "Select items" section contains a table of medical items with columns for CODE, NAME, and QUANTITY. The table includes items like ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP (59), ACIDE FOLIQUE 5 MG CP (1), ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO (3), ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ (8), AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G (16), AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G (30), ALBENDAZOLE 400 MG CP (4), ALBENDAZOLE 400 MG CP (96), AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP (20), AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP (3), and AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MOIS) PLQ/3 CP (27). To the right of the table is a large white box with the text "Click on an item to add it". At the bottom right of the screen are "Cancel" and "Next" buttons.

CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	59
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MOIS) PLQ/3 CP	27

Você deve selecionar pelo menos um item antes de continuar.

Após selecionar um item, você deve ajustar as quantidade usando os botões + e -, ou digitar a quantidade no campo de texto (clique sobre o campo para o que teclado apareça).

The screenshot shows the 'Prescription 922' screen. At the top, there are three numbered steps: 1. Select the prescriber (Patient: Joshua Griffin), 2. Select items, and 3. Finalise (Prescriber: Jasmine McKewen). Step 2 is currently active. On the left, a table lists various medical items with their codes, names, and quantities. On the right, a detailed view of the selected item 'ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP' is shown with a quantity of 1. Below this is a 'Usage directions' field. At the bottom right are 'Cancel' and 'Next' buttons.

CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	58
AM18032-0	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NIFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM03065-0	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 21G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02080-0	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02080	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTE PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ENFANT (6-14 ANS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-11 MOIS) PLQ/3 CP	27

Você também pode remover itens usando o botão X.

Digite indicações para uso de cada medicamento no campo de texto **indicações (directions)**.

Após atualizar as quantidades, o botão **Próximo (Next)** estará habilitado para que você siga para o passo 3.

Observe que se você clicar em **Cancelar (Cancel)**, ou no botão voltar (no canto superior esquerdo do ecrã) a sua prescrição em andamento será **DELETADA**.

The screenshot shows the mSupply mobile application interface for prescription management. At the top, there is a header with the date and time (2026/01/29 19:22), the page number (11/18), and the title "Distribuição". Below the header, the screen is divided into three main sections:

- Section 1 (Patient):** A search bar with the placeholder "Patient" and the name "Joshua Griffin".
- Section 2 (Prescriber):** A search bar with the placeholder "Prescriber" and the name "Jasmine McKewen".
- Section 3 (Finalise):** A button labeled "Finalise" with a checkmark icon.


In the center, there is a table titled "Select the prescriber" showing a list of items with columns for CODE, NAME, and QUANTITY. One item is selected: "AR33197 ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP" with a quantity of 56. To the right of the table is a detailed view of the selected item, showing its name, a minus sign to decrease quantity, the current quantity (3), a plus sign to increase quantity, and a link to "Usage directions".

CODE	NAME	QUANTITY
AR33197	ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP	56
AM1832-D	ACIDE FOLIQUE 5 MG CP	1
AM12040	ACIDE NEFLUMIQUE 400 MG SUPPO	3
AM33065-D	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 MG / 5 ML AMP INJ	8
AR47015	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 25G	16
AR47016	AIGUILLE POUR PRELEVEMENT 23G	30
AM02090-D	ALBENDAZOLE 400 MG CP	4
AM02090	ALBENDAZOLE 400 MG CP	96
AY02020	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/270 MG ADULTO PLQ/6 CP	20
AY02015	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 100/200 MG ENFANT (6-14 ANOS) PLQ/3 CP	3
AY02027	AMODIAQUINE/ARTESUNATE 25/67.5 MG ENFANT (0-5 MESES) PLQ/3 CP	27


At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Next".

Passo 3

Visualize o resultado final da prescrição e adicione os últimos detalhes como um comentário.

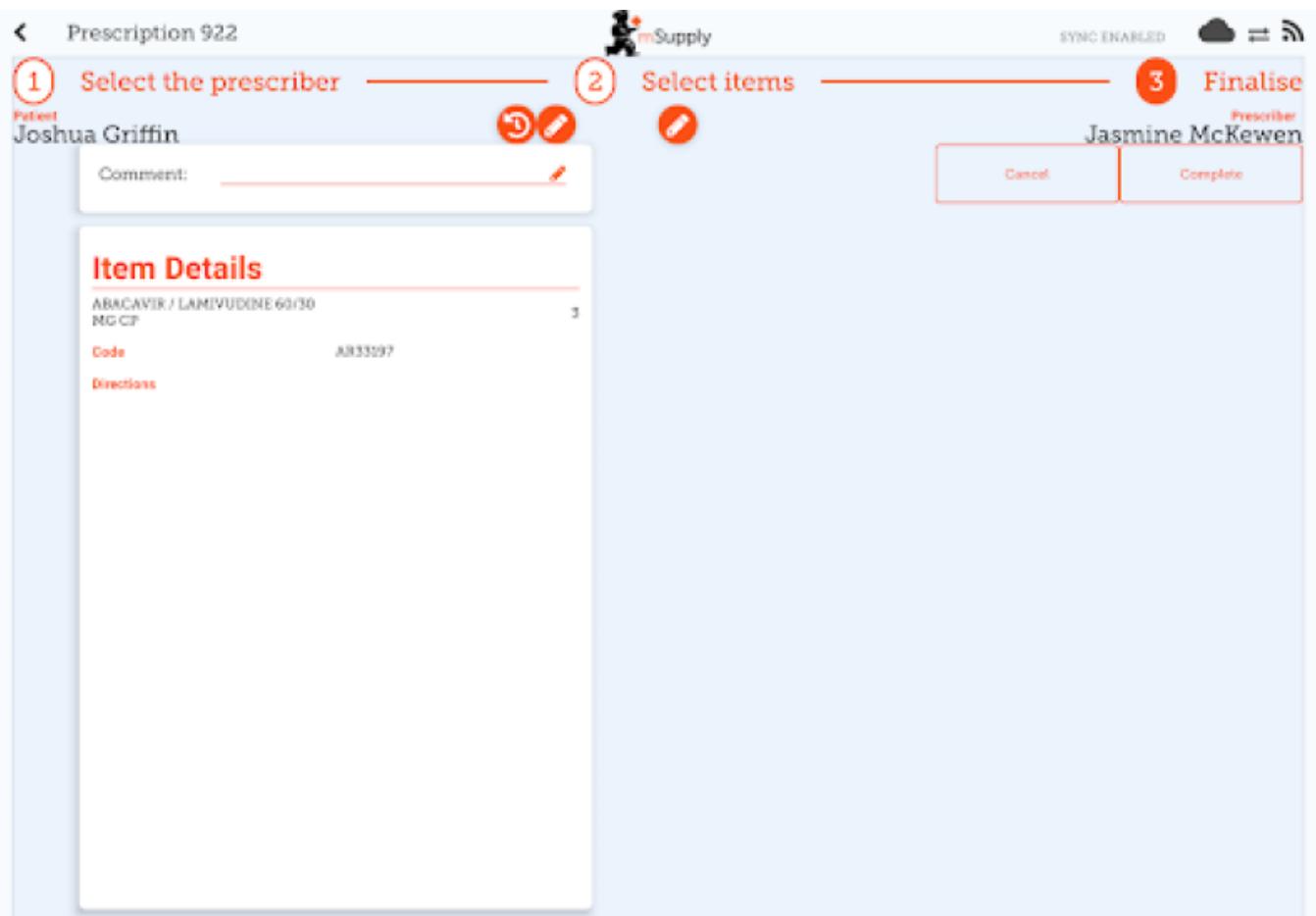

Ao clicar no botão **Completar** (*Complete*) a prescrição será finalizada. O que significa que ela não poderá mais ser modificada.

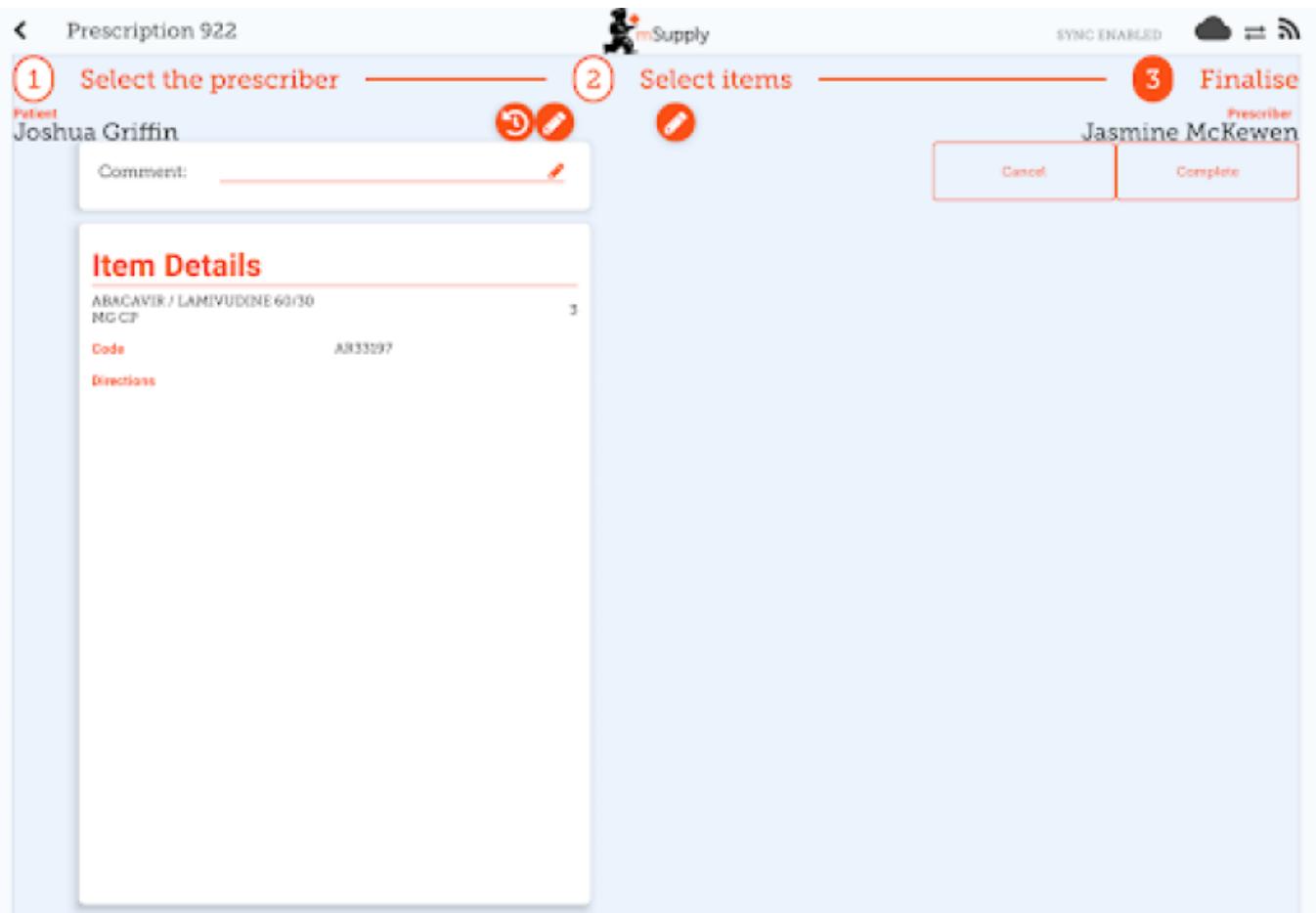


Muito fácil, não é? E se você tem o modulo de pagamentos habilitado, você poderá seguir para o próximo para o cliente realizar o pagamento. Caso contrário você irá voltar para a tela de **Distribuição** (*Dispensary*) para adicionar novas prescrições.

Pagamentos

O modulo de **pagamentos** (*payments*) deve estar configurado no servidor para ser usado no seu local, então se não estiver habilitado, você não verá a opção para pagamentos durante a Distribuição. As instruções de configuração estão [aqui](#). Os campos de customização no seu local que devem estar marcados como “true” são:

- usesDispensarymodule
- usesPaymentsmodule

Quando o modulo de pagamentos estiver habilitado, no último passo da Distribuição onde você é apresentado ao resumo da prescrição, você também verá o resumo do pagamento e cada item terá o seu valor apresentado:

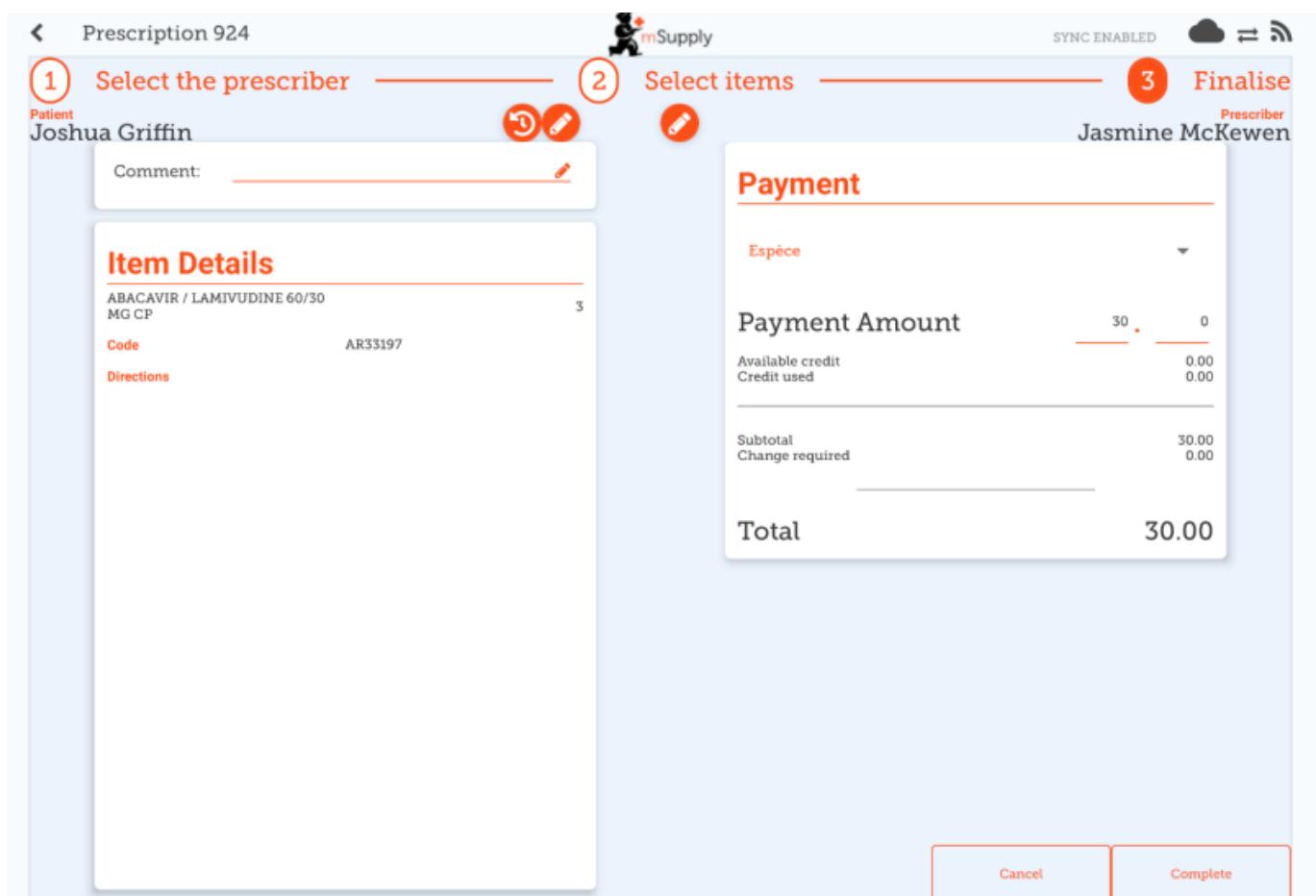


A caixa de seleção sob o campo **Pagamento** (Payment) permite a seleção de tipos de pagamento pré-definidos. (Os tipos de pagamento deverão estar configurados previamente no servidor).




- O **Valor pago** (Payment Amount) é o valor pago pelo paciente
- Se o paciente possui crédito disponível, o valor de crédito será apresentado sob **Crédito usado** (Credit Used)
- O valor pago só pode ser menor do que o **Total**, se o paciente possuir crédito o suficiente para o valor restante
- O **Valor do troco** (Change Required) é o valor excedente pago que deve ser devolvido ao paciente
- Para finalizar a prescrição com o modulo de pagamento habilitado, o valor pago + crédito usado deve ser igual ao total.

Aqui está um exemplo de um paciente que não tinha crédito suficiente disponível:

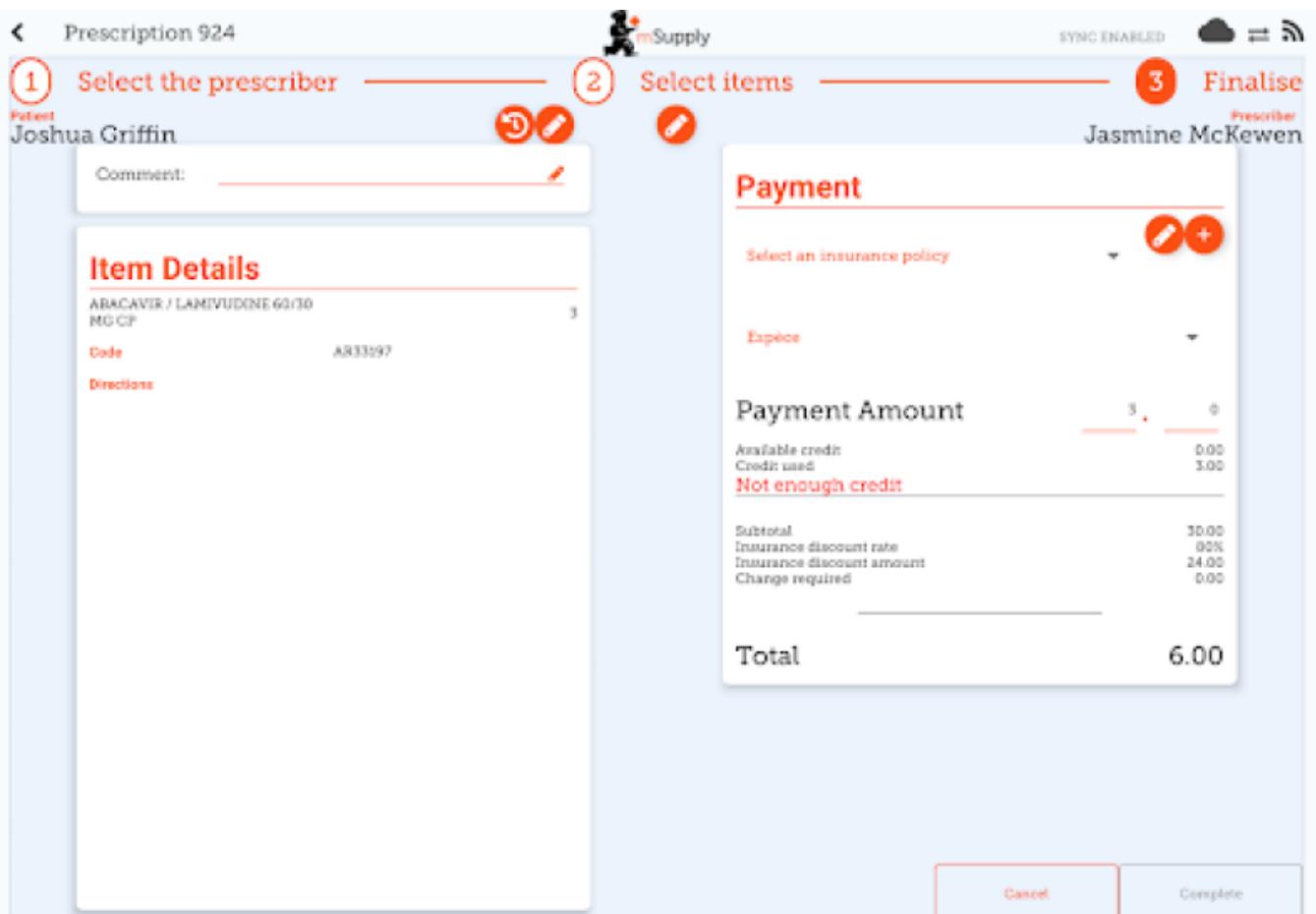

E aqui está um exemplo de um valor pago acima do valor total, com o valor de troco apresentado:

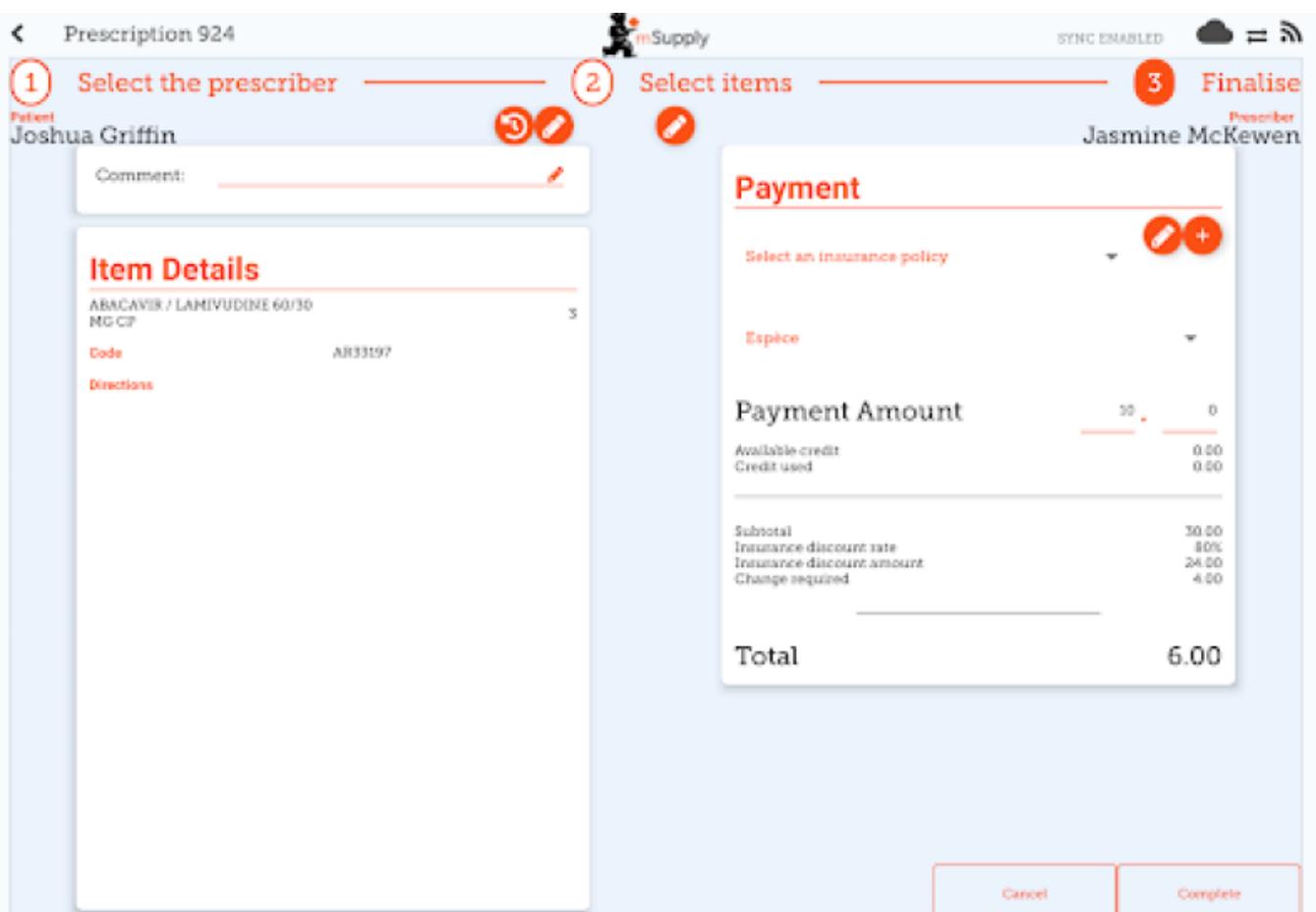

Seguro

Se existem Provedores de seguros habilitados no servidor, o seu local mSupply mobile também terá essa opção disponível.

Com isso a caixa de seleção sob o campo **Seguro (Insurance)** e o botão **adicionar** (o circulo laranja com sinal +):

Prescription 924

Patient Joshua Griffin

Comment: _____

Item Details

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP

Code: AR33397

Directions:

Payment

Select an insurance policy

Spécie

Payment Amount

Available credit: 0.00
Credit used: 0.00

Subtotal	30.00
Insurance discount rate	0%
Insurance discount amount	0.00
Change required	0.00
Total	30.00

Cancel Complete

Se o paciente estiver sob um seguro de saúde, você poderá selecioná-lo na caixa de seleção:

Payment

Select an insurance policy

123123 456

Payment Amount

22 . 50

Você pode usar os botões **Editar** (o ícone da caneta) e **Adicionar** (o ícone com sinal +) para adicionar e editar os seguros da lista.

Ao clicar no botão **Adicionar** você pode adicionar um seguro de saúde:

Insurance Policy

Personal policy number
is required

Family policy number
is required

Discount rate

25

Policy provider

ALLIANCE

Is active

yes
no

Policy type

Personal
Business

Cancel
Save

O botão **Salvar** (Save) somente ficará habilitado quando os campos obrigatórios forem preenchidos.

Se as categorias para transação estiverem habilitadas no servidor, você poderá escolher uma categoria na área esquerda do ecrã:



Anterior: [Indicadores](#) | | Próximo: [Caixa registradora](#)

From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - mSupply Foundation Documentation

Permanent link:

https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:user_guide:dispensing

Last update: **2020/03/10 02:37**

